


感染予防のための  
個人防護具(PPE)の  
カタログ集  
2022年版





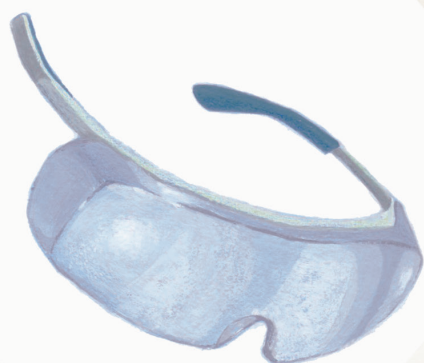

## 個人防護具（PPE）等のカタログ集の広告協賛企業（五十音順）

### 【職業感染制御研究会会員企業】

イワツキ株式会社

○ & M Halyard Japan 合同会社

興研株式会社

サラヤ株式会社

株式会社ジェイ・エム・エス

スリーエム ジャパン株式会社

株式会社トップ

ニプロ株式会社

株式会社ホギメディカル

株式会社名優

メドライン・ジャパン合同会社

株式会社モレーンコーポレーション

### 【職業感染制御研究会非会員企業】

株式会社重松製作所

柴田科学株式会社

日本カノマックス株式会社

# アイウェア・フェイスシールド

## イワツキ アイシールド

### 製品概要

- ・血液や体液などの飛沫から眼を防護します

### 性能



- ・フレーム表面が滑らかなため、飛沫などが拭き取りやすく、清潔に使用できます
- ・レンズの穴をフレームの突起に取り付けるだけで簡単に装着できます

### 快適性

- ・曇り止め加工を施し、クリアな視界を維持します
- ・両面保護フィルム付きで、指紋の付着や傷を使用直前まで防ぎます

### その他の特徴

- ・フレームの先セルに穴が開いているため、フック等に掛けられます
- ・眼鏡の上からでも装着できます

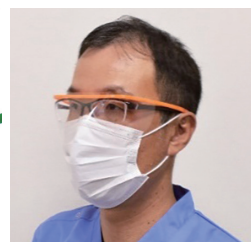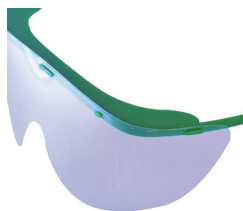

眼鏡の上から装着

詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

 **イワツキ株式会社**

〒174-8556 東京都板橋区志村 1-32-18

TEL 03-3966-8371 <https://www.iwatsuki.co.jp>

## HALYARD セーフビュー アイシールド

### 製品概要

- ・シングルユースのアイウェア
- ・フレームは再利用可能。レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換可能

### 規格

- ・入数: 10組×5袋/50組

### 性能


- ・液体防護マスクとの併用で、軽度な液体曝露からの顔面保護が可能

### 快適性

- ・軽量で長時間使用可能

### その他の特徴

- ・交換用としてレンズ単体(50001), フレーム単体(50002)もございます

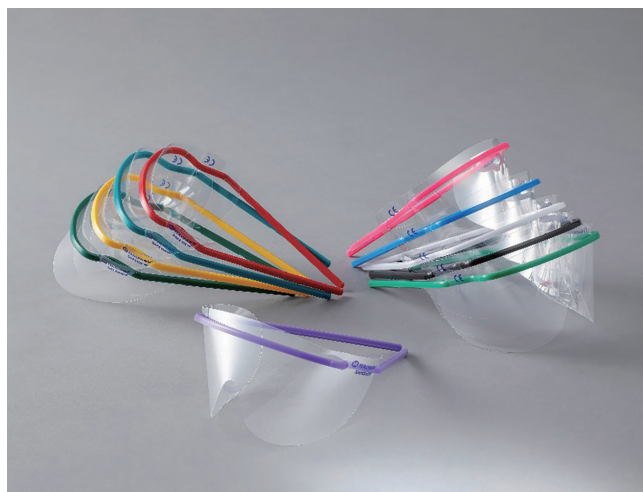

### 資料請求先

 Owens  
& Minor

 HALYARD

**O&M Halyard Japan 合同会社**

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574

<https://www.halyardhealthcare.com>

## サラヤ ゴーグル

### 製品概要

- 湿性生体物質等の飛沫から目を守ります
- 眼鏡の上からも装着可能なオーバーグラスタイプです
- 曇り止め加工を施しており、クリアな視界を確保します
- サイドプロテクターにより横からくる飛沫から目を守ります

### 規格

- サイズ: フリーサイズ
- 1箱5個入り

### 性能

- ANSI Z87.1規格に準拠
- EN166規格に準拠

### その他の特徴

- 本体に静電気防止加工を施しています
- テンプルの長さが調整可能です



### 資料請求先

サラヤ株式会社 **SARAYA**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

TEL 06-6797-2525

資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部

TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## 保護めがね LXシリーズ

### 規格

- 販売単位  
LX-22…1個  
LX-55…1個  
LX-01…1個

### 性能

- JIS T 8147:2016「保護めがね」適合品
- EN 166:2002「Personal eye-protection」クラス1適合品

### 快適性

- **LX-22(ゴグル形)**  
顔との密着性が良いゴグルで、ベンチレーターなし  
非常に強い防曇性能があります  
メタルフリーで軽量です
- **LX-55(スペクタクル形)**  
ヒンジが無い画期的なデザインです  
レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプで広視野です  
メタルフリーで軽量です
- **LX-01(スペクタクル形)**  
小さめサイズなので、小顔の方にもぴったりフィットします  
ブリッジ、鼻あて(ノーズループ)、テンプル、耳あて(モダン)  
が、顔の形に合わせて快適にフィットします  
色違いのLX-02(カラー:マゼンタ)もあります

### その他の特徴

- LX-22及びLX-55は、視力矯正めがねと併用できます
- N95マスク等と併用できます



LX-22



LX-55



LX-01

### 資料請求先

 株式会社 **重松製作所**  
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

〒101-0024 東京都北区西ヶ原 1-26-1

TEL 03-6903-7525 <https://www.sts-japan.com>

## 3M™ マスクにくっつくアイガード EAG-1/EAG-1M

### 製品概要

- マスクに押し当てるだけで簡単にくっつく眼の防護具です
- サージカルキャップにくっつけて使用することもできます
- 3M™ メカニカルファスナー技術を採用し、メカニカルファスナーがマスクの不織布面に絡み付いてくっつく仕組みです
- ギラつきが気になったり位置を調整したいときはつけ直しも簡単です

### 規格

- EAG-1:120枚/箱 EAG-1M:40枚/箱

### 快適性

- 曇り止め加工フィルムを採用し、クリアな視野で快適なつけ心地を実現しています

### その他の特徴

- PPEラックや壁にかけるなど、すぐに手の届くアクセスの良い場所に設置が可能です
- 眼鏡の上からでも装着できます

3Mは3M社の商標です。



### 資料請求先

#### スリーエム ジャパン株式会社

〒158-8583 東京都品川区北品川 6-7-29

カスタマーコールセンター：0570-011-321

[http://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/company-jp/](http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/)

## フレームレスアイシールド・FLES-1

### 製品概要

- アイシールド(フレームレス)
- ご自身の眼鏡に装着するタイプのアイシールドです

### 規格

- 50枚/箱, 10箱/ケース

### 性能


- 3Dモニターゴーグルやマイクロスコープゴーグルにも装着可

### 快適性

- 超高透過率, 低反射率により, 透明感を実現
- 長時間着用による疲労を軽減します

### その他の特徴

- 外科医自身の眼鏡の汚染がなく, 洗浄・清拭が不要
- 曇り止め加工済み

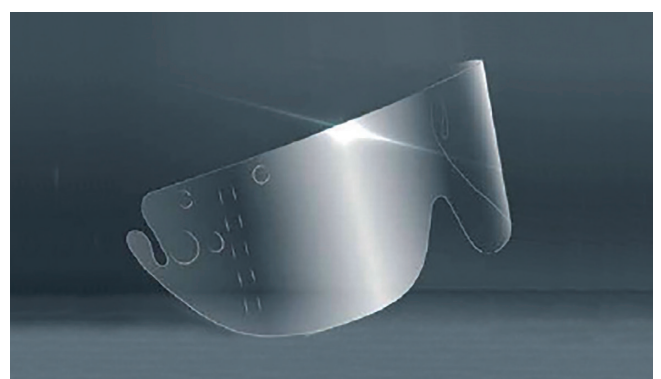

### 資料請求先

#### 株式会社ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7

TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344

<https://www.hogy.co.jp>

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

## メワブライト・HG-4

### 製品概要

- ・感染対策用保護ゴーグル
- ・ご自身の眼鏡に装着するタイプのアイシールドです

### 規格

- ・1個/箱, 5箱/ケース

### 性能

- ・保護眼鏡に関するJIS規格: JIS T 8147適合品です
- ・完全装着型(ベンチレーター付)のHG-4
- ・着脱が簡単なグラスタイプのHG-7の2種類

### 快適性

- ・医療従事者の眼を保護します
- ・蛍光灯無影灯下での視認性を重視し, 広い視野を確保します
- ・長時間着用による疲労を軽減します

### その他の特徴

- ・外科医自身の眼鏡の汚染がなく, 洗浄・清拭が不要
- ・無気孔タイプの完全装着型です
- ・曇り止め加工のレンズです



### 資料請求先

株式会社ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7  
TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344  
<https://www.hogy.co.jp>

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

## セーフティアイウェア シリーズ

### 製品概要

- ・装着しやすくなる機能とデザイン
- ・医療現場で求められる安全性に加えて, スタイリッシュさも兼ね備えるセーフティアイウェアシリーズは様々なラインナップで医療従事者の眼を守ります

### 性能

- ・セーフティアイウェア [Model-507], [Model-5X6], [Model-5X7]
- ・EN166に準拠

### その他の機能

- ・**セーフティアイウェア [Model-507]**  
テンプルの長さやフロントアングルをフレキシブルに調整できる機能を搭載。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズを採用
- ・**セーフティアイウェア [Model-5X6]**  
新設計で軽量のフレームには長さ調整ができるテンプルや微調整が可能なノーズパッドを搭載。ポリカーボネート製レンズを採用
- ・**セーフティアイウェア [Model-5X7]**  
Model-5X7は眼鏡の上からでもスタイリッシュに装着できるオーバーグラス仕様。新設計の軽量フレームは長さ調整ができるテンプルを採用
- ・**ビジュエラ [Model-712]**  
レンズ部はディスプレイでリユース可能なフレームと合わせても超軽量(9g)。下方だけではなく, 上部からの飛沫も防衛し, また眼鏡の上からも装着可能
- ・全てAF(曇り止め)機能付き



セーフティアイウェア  
[Model-507]



セーフティアイウェア  
[Model-5X6]



セーフティアイウェア  
[Model-5X7]



ビジュエラ  
[Model-712]

詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション

〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
<http://www.moraine.co.jp> お問い合わせ [info@moraine.co.jp](mailto:info@moraine.co.jp)






## ハイラック専用フェイスシールド ハイシールド

### 規格

- ・ サイズ: フリーサイズ
- ・ 1箱50枚入り (N95マスクは別売り)

### 快適性

- ・ 微粒子の飛沫や液体の飛沫などが、目または顔にかかるのを防ぎます
- ・ ハイラック専用のフェイスシールドです
- ・ **曇りにくい**  
シールドとマスクの間に空間を設けています
- ・ **取り付けかんたん**  
ハイラックに直接取付けて固定します
- ・ **軽量 約16g**  
装着時の負担を軽減します  
ヘッドバンド等による圧迫感もありません

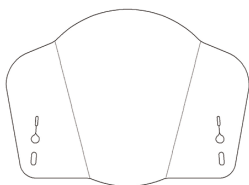

ハイシールドの展開図



ハイラック 350 型にハイシールドを装着した状態

### 資料請求先

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

興研株式会社 興研株式会社

〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地  
TEL 03-5276-1917 FAX 03-3265-1976  
<https://www.koken-ltd.co.jp/hiluck/>

## セーブフェイスシールド

### 製品概要

- ・ 広く、クリアな視界のフェイスシールドです
- ・ 眼鏡やマスクを着けたまま使用できます

### 規格

- ・ シールド部分: 長さ23cm
- ・ ドレープ部分: 長さ18.5cm

### 性能

- ・ ドレープ付タイプは下からの飛沫も防ぎます

### 快適性

- ・ 締め付け感がなく、快適な装着感です
- ・ ラテックスフリー



### 資料請求先

株式会社名優

**Meilleur**  
mèi jū:

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2  
TEL 047-480-6161 FAX 047-480-6162

## イワツキ メディカルマスク

### 製品概要

- ・ ASTM規格に適合したサージカルマスク

### 規格

- ・ M10PSは小さめサイズ

### 性能

- ・ 医療用マスク米国規格 ASTM F2100-11 Level 1に適合
- ・ 細菌ろ過効率: BFE (%)  $\geq 99\%$
- ・ 微粒子ろ過効率: PFE (%)  $\geq 99\%$
- ・ 血液不浸透性: 80mmHg

### 快適性

- ・ 呼吸抵抗が少なく、呼吸しやすいマスクです
- ・ 呼吸抵抗:  $\Delta P$  (mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>) < 2.5 (M-10B)
- ・ 呼吸抵抗:  $\Delta P$  (mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>) < 2.8 (M-10PS)

### その他の特徴

- ・ 日本製



〈M10PS〉



〈M10B〉



詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

**イワツキ株式会社**

〒174-8556 東京都板橋区志村 1-32-18

TEL 03-3966-8371 <https://www.iwatsuki.co.jp>

## HALYARD フルイドシールド レベル3 イアーループマスク

### 製品概要

- ・ ASTM F2100-11 レベル3適合のマスク
- ・ イアーループマスク

### 規格

- ・ 入数: 40枚/箱×10箱

### 性能

- ・ 液体バリア性 160mmHg, BFE  $\geq 99.8\%$ , PFE  $\geq 98.9\%$
- ・ 呼吸抵抗  $\Delta P < 3.0$  mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>の液体バリア性がありながら息苦しさが軽減されています
- ・ ASTM F2100-11レベル3適合

### 快適性

- ・ サテン仕上げで皮膚刺激を低減するソーソフト生地をインナーに採用

### その他の特徴

- ・ イアーループタイプ(47107), ひもタイプ(48207)の2種類
- ・ ASTM F2100-11 レベル1適合イアーループタイプ(25868), ひもタイプ(28802)



### 資料請求先



**O&M Halyard Japan 合同会社**

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574

<https://www.halyardhealthcare.com>

## HALYARD フルイドシールド レベル1 イアーループマスク バイザー付

### 製品概要

- ASTM F2100-11 レベル1適合のマスク
- バイザー一体型のイアーループマスク

### 規格

- 入数:25枚/箱×4箱

### 性能

- 液体バリア性 80mmHg, BFE  $\geq$ 99.7%, PFE  $\geq$ 98.4%
- 呼吸抵抗  $\Delta P < 3.0 \text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$ の液体バリア性がありながら息苦しさが軽減されています
- ASTM F2100-11レベル1適合

### 快適性

- サテン仕上げで皮膚刺激を低減するソーソフト生地をインナーに採用
- バイザー部は曇り止め加工済み

### その他の特徴

- イアーループタイプ(41798), ひもタイプ(41799)の2種類
- ASTM F2100-11 レベル3適合イアーループタイプ(47147), ひもタイプ(48247)



### 資料請求先



## O&M Halyard Japan 合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー  
TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574  
<https://www.halyardhealthcare.com>

## サラヤ サージカルマスク

### 製品概要

- 細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布3層構造です
- 形をつけやすく崩れにくいノーズピースで顔にしっかりフィットします

### 規格

- サイズ:フリーサイズ(ホワイト, ピンク, ブルー), Sサイズ(ホワイト, ピンク)
- 1箱50枚入り

### 性能

- ASTM-F2100-19 レベル1適合(ホワイト, ピンク), レベル2適合(ブルー)
- **サージカルマスク ホワイト, ピンク**  
細菌ろ過効率: BFE (%)  $\geq$ 98 微粒子ろ過効率: PFE (%)  $\geq$ 98 呼吸抵抗:  $\Delta P(\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2) < 5$  血液不浸透性: (mmHg) 80 延焼性: CLASS1
- **サージカルマスク ブルー**  
細菌ろ過効率: BFE (%)  $\geq$ 98 微粒子ろ過効率: PFE (%)  $\geq$ 98 呼吸抵抗:  $\Delta P(\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2) < 6$  血液不浸透性: (mmHg) 120 延焼性: CLASS1

### 快適性

- 丈夫でソフトなイヤークリップを使用し、耳の痛みに配慮しています
- アレルギーに配慮したラテックスフリーの素材を使用



サージカルマスクブルー



サージカルマスクブルー



サージカルマスク F ホワイト



サージカルマスク S ホワイト



サージカルマスク F ピンク



サージカルマスク S ピンク

### 資料請求先

## サラヤ株式会社 SARAYA

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8  
TEL 06-6797-2525  
資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部  
TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## サラヤ シールドマスク

### 製品概要

- 湿性生体物質から目を守るアイシールドと鼻・口を守るサージカルマスクが一体になった製品です
- シールド部分に曇り止め加工を施しており、クリアな視界を確保します
- 形をつけやすく崩れにくいノーズピースで顔にしっかりフィットします

### 規格

- サイズ:フリーサイズ
- 1箱25枚入り

### 性能

- ASTM-F2100-19 レベル2適合(マスク部分)
- 細菌ろ過効率: BFE (%)  $\geq 98$  微粒子ろ過効率: PFE (%)  $\geq 98$  呼吸抵抗:  $\Delta P$  (mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>) < 6 血液不浸透性: (mmHg) 120 延焼性: CLASS1

### 快適性

- マスク部分は息苦しさがなく肌触りの良い不織布を採用しています
- ラテックスフリーで耳が痛くなりにくい平ゴムを使用しています



### 資料請求先

サラヤ株式会社 **SARAYA**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

TEL 06-6797-2525

資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部

TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## JMS サージカルマスク

### 製品概要

- サージカルマスク(ひもタイプ)
- 三層構造のサージカルグレードマスクです

### 規格

- 50枚/箱

### 性能

- BFE:  $\geq 98\%$   
※BFE: 細菌ろ過効率(%)

### 快適性

- 口元素材にソフトな肌触りの材質を使用しています



### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町 12 番 17 号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## JMS サージカルマスク

### 製品概要

- ・三層構造のサージカルグレードマスクです
- ・太く平らな耳かけゴムで、長時間の使用でも耳への負担を軽減します

### 規格

- ・50枚/箱

### 性能

- ・M37シリーズは、BFE  $\geq 97$
- ・M35シリーズは、BFE グリーン・ピンク  $\geq 97$ 、ブルー・ホワイト  $\geq 95$
- ※BFE: 細菌ろ過効率(%)

### 快適性

- ・呼吸がしやすく、飛まつ感染予防に効果的なマスクです
- ・M37シリーズは、口元素材に肌にやさしいレーヨンを使用し、口元にゆとりがあるカップキーパー構造になります

### その他の特徴

- ・ポリエチレン製の樹脂ノーズピースを採用しており、分別廃棄が不要



M37シリーズ		M35シリーズ	
本体 サイズ	ピンク: 90×145mm	本体 サイズ	ピンク: 90×145mm
	ブルー: 90×160mm		ブルー: 90×175mm
	グリーン: 90×175mm		グリーン: 90×175mm
	ホワイト: 90×175mm		

### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町12番17号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## ニプロ サージカルマスク

### 製品概要

- ・国産で、小児から成人まで幅広いユーザーにご提案可能です

### 規格

- ・入数: 50枚入/箱
- ・サイズ: バリエーション 小児～成人まで3種類

### 性能

- ・製品実測値 PFE: 99%以上
- ・製品実測値 BFE: 97%以上
- ・製品実測値 VFE: 96%以上

### 快適性

- ・製品実測値  $\Delta P$ : 18.8Pa/cm<sup>2</sup>以下

### その他の特徴

- ・ゴムひも(耳掛け)タイプ、ひもタイプの2種類
- ・カラー: ホワイト、グリーン、ピンクの3種類



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## サージカルマスク・MM-ASM-1

### 製品概要

- ・ サージカルマスク

### 規格

- ・ 50枚/箱, 20箱/ケース

### 性能

- ・ サージカルマスクのASTM F2100-11 基準 準拠
- ・ Level 2 Barrier
- ・ PFE (0.1  $\mu\text{m}$ )  $\geq$  98%, BFE (3.0  $\mu\text{m}$ )  $\geq$  98%で十分なバリア性あり
- ・ 曇り止め機能付きで4層構造

### 快適性

- ・  $\Delta P < 5.0\text{mm}\cdot\text{H}_2\text{O}/\text{cm}^2$ の通気性

### その他の特徴

- ・ 製法穴のないウルトラソニック加工
- ・ 標準品から折り方に特徴のあるもの, 着脱が容易なゴムタイプまでバリエーション豊富な品揃え



MM-ASM-1



### 資料請求先

株式会社ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7  
TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344  
<https://www.hogy.co.jp>

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

## サージカルマスク・FBM-181

### 製品概要

- ・ サージカルマスク (高性能タイプ)

### 規格

- ・ 50枚/箱, 20箱/ケース
- ・ 181 (ヒモタイプ), 186 (ゴムタイプ)

### 性能

- ・ サージカルマスクのASTM F2100-19基準準拠
- ・ Level 3 Barrier
- ・ PFE (0.1  $\mu\text{m}$ )  $\geq$  98%, BFE (3.0  $\mu\text{m}$ )  $\geq$  98%で十分なバリア性あり
- ・ 曇り止め機能付きで4層構造
- ・ フェイスガード付き

### 快適性

- ・  $\Delta P < 6\text{mm}\cdot\text{H}_2\text{O}/\text{cm}^2$ の通気性を保証

### その他の特徴

- ・ 危険な液体から医療従事者を防護することを目的に開発された米国最新規格対応
- ・ アウターカバー, 高性能フィルター, 特殊構造不織布, インナーカバーの4層構造



### 資料請求先

株式会社ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7  
TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344  
<https://www.hogy.co.jp>

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

## アクティブサージカルマスク

### 製品概要

- ・マスク表面の細菌やウイルスを5分で不活性化するマスク
- ・マスクを介した二次感染防止に役立ちます

### 規格

- ・普通サイズ: タテ9.3cm×ヨコ17.5cm
- ・小さめサイズ: タテ9cm×ヨコ16cm

### 性能

- ・ASTM F2100 Level 3適合
- ・EN14683 Type II R適合
- ・BFE (細菌ろ過率): 99.9%
- ・VFE (ウイルスろ過率): 99.9%
- ・液体防護性: 160mmHg

### 快適性

- ・息がしやすい
- ・肌にやさしい
- ・耳ざわりがよい

### その他の特徴

- ・ヨウ素を用いた特許技術TRIOMED™テクノロジー採用



資料請求先

**Meilleur**  
mèi jū:

株式会社名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2  
TEL 047-480-6161 FAX 047-480-6162

## ゼロマスク

### 製品概要

- ・口が触れる部分に触ることなく、一枚ずつ取り出して装着ができるため、感染のリスクが軽減されます

### 規格

- ・32枚入/パック×20パック入/ケース
- ・サイズ: フリー

### 性能

- ・医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-11 Level 2適合
- ・バクテリアろ過効率 BFE: >99%
- ・微粒子ろ過効率 PFE: >99%
- ・圧力差(ΔP): <3.2mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>
- ・液体防御性能: 120mm Hg
- ・難燃性レベル: Class1

### 快適性

- ・肌触りが良い材料と、耳が痛くならないストラップを採用しています
- ・自由自在に変形するノーズワイヤーが鼻筋にしっかりフィットし、外からの粒子の侵入をより防ぐことができるほか、眼鏡も曇りにくいマスクです



詳細な製品  
情報はこちら



資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
http://www.moraine.co.jp お問い合わせ info@moraine.co.jp

## HALYARD フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター

### 製品概要

- ・ 軽量でフィットしやすいくちばし型のN95レスピレーター
- ・ NIOSH認定のN95レスピレーター

### 規格

- ・ 入数: 35枚/箱×6箱
- ・ サイズ: レギュラー(46727), スモール(46827)の2種類

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ NIOSH TC-84A-7521(46727)
- ・ NIOSH TC-84A-7518(46827)

### 性能

- ・ ASTM F2100-11 レベル3の基準を満たす液体防護性能
- ・ 液体バリア性 160mmHg, BFE ≥99%, PFE ≥99%
- ・ 7種類の薬剤耐性試験済 (ATSM F739-12)

### 快適性

- ・ 空間が広く呼吸がしやすいくちばし型
- ・ サテン仕上げで皮膚刺激を低減するソーソフト生地をインナーに採用

### その他の特徴

- ・ 快適性、防護性に優れたハリヤードのN95レスピレーターは、20年以上にわたり医療従事者の安全に貢献しています



N95 レスピレーターの適切な着用方法は動画でご覧いただけます。



### 資料請求先



### O&M Halyard Japan 合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー  
TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574  
<https://www.halyardhealthcare.com>

## N95レスピレーター サカキ式 ハイラック350型

### 規格

- ・ サイズ: フリーサイズ ・ 1箱10枚入り

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 米国NIOSH規格 N95 認定: TC-84A-4342
- ・ 日本防じんマスク国家検定合格 DS2: 第TM339号, 第TM609号

### 性能

- ・ 使い捨て式防じんマスク 区分: DS2 (捕集効率95%以上)
- ・ 液体防護性能 (人工血液バリア性): 21.3 kPa (160mmHg)
- ・ 使用限度時間: 13時間
- ・ 保管期限: 製造年月より5年間

### 快適性

- ・ **抜群のフィット性能**  
顔と隙間を作らない3次元立体接顔体 (FFリップ) 採用  
長さ調整が可能なしめひも
- ・ **しめひもは吸湿性に優れ、肌ざわりの良いウレタン製**  
ゴムアレルギーによる肌荒れを防ぎます (ラテックスフリー)
- ・ **接顔体表面は吸湿性が良く肌ざわりの良い素材を使用しています**

### その他の特徴

- ・ 内側の保形ネットにより変形を防ぎます
- ・ 金属部品が無いため焼却処理が可能



### 資料請求先

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

### 興研株式会社 興研株式会社

〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地  
TEL 03-5276-1917 FAX 03-3265-1976  
<https://www.koken-ltd.co.jp/hiluck/>



## JMS マスク

### 製品概要

- ・ N95マスク (ダックビルタイプ)
- ・ 先端に折込があり、広い過面積を持つ構造により、細菌捕集効果、通気性に優れています

### 規格

- ・ 50枚/箱

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ N95規格:NIOSH認定(TC-84A-3348)

### 性能

- ・ NaCl粒子捕集効率  $\geq 95\%$

### 快適性

- ・ マスクの口元側には、毛羽立ちの少ない、肌にやさしい素材を使用
- ・ 軽量なので装着時の負担が少なく、顔面に密着するので結核などの空気感染予防に有効です



### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町12番17号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## N95マスク DD02-N95-2K

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ NIOSHが定める規格N95合格品(合格番号:TC-84A-7646)

### 快適性

- ・  $\Lambda$ (ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりとキープします
- ・ 3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で顔にぴったり密着します
  - アジャスター**  
しめひもの長さ調節ができます
  - クッション**  
内側のクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます
  - 鼻当て**  
外側の鼻当てによって、鼻の形に合わせることができます
- ・ 立体構造なので、呼吸も会話も楽にできます
- ・ 金属部品を使用していません

### その他の特徴

- ・ 梱包タイプが選べます
  - ① **個装タイプ**  
衛生的で、備蓄・携帯用に最適
  - ② **二つ折タイプ**  
チャック付きポリ袋入りで、毎日の業務に便利
- ・ 当社ウェブサイト動画「ラムダライン 装着・外し方」を紹介しています



DD02-N95-2K 装着例



①個装タイプ

②二つ折タイプ

### 資料請求先



〒101-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1  
TEL 03-6903-7525 <https://www.sts-japan.com>

## 3M™ Aura™ N95微粒子用マスク (医療用) 1870+

### 製品概要

- 作業中にずれにくい可動式三面構造の、医療向けのN95微粒子用マスクです

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- NIOSH (84A-5726)
- FDA 510(k) (K063023)

### 性能

- 捕集効率試験で直径0.3マイクロメートルの微粒子を95%以上捕集します
- サージカルマスクとしての耐水性があり、血液を含む液体等の曝露予防に有用です

### 快適性

- 表面積が広く呼吸が楽なタイプです
- ISO10993に基づく『ヒトくり返しパッチテスト』を実施し、安全性を確認しています (すべての人にアレルギー反応を起こさないということではありません)

### その他の特徴

- 可動式三面構造で鼻から首もとまでカバーし、顔を動かしてもずれにくい設計です
- 着用しやすいように鼻あて部分とあごあて部分にタブがついています

3M, Auraは3M社の商標です。



### 資料請求先

#### スリーエム ジャパン株式会社

〒158-8583 東京都品川区北品川 6-7-29  
カスタマーコールセンター：0570-011-321  
[http://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/company-jp/](http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/)

## 3M™ N95微粒子用マスク (医療用) 1860/1860S

### 製品概要

- 医療向けのN95微粒子用マスクです

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- NIOSH (84A-0006)
- FDA 510(k) (K955382)

### 性能

- 捕集効率試験で直径0.3マイクロメートルの微粒子を95%以上捕集します
- サージカルマスクとしての耐水性があり、血液を含む液体等の曝露予防に有用です

### 快適性

- 簡単に装着することができ、初めて使用される方にも負担になりません
- ISO10993に基づく『ヒトくり返しパッチテスト』を実施し、安全性を確認しています (すべての人にアレルギー反応を起こさないということではありません)

### その他の特徴

- レギュラーサイズの他にスモールサイズがあり、小顔の方にもフィットしやすい設計です

3Mは3M社の商標です。



### 資料請求先

#### スリーエム ジャパン株式会社

〒158-8583 東京都品川区北品川 6-7-29  
カスタマーコールセンター：0570-011-321  
[http://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/company-jp/](http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/)

## ニプロ 微粒子マスク N95

### 規格

- ・入数:20枚入/箱

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ NIOSH TC-84A-3348

### 快適性

- ・ 立体構造によりろ過面積を広くしたことで、通気性が優れた呼吸のしやすいマスクであり、長時間の使用が可能です



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## N95マスク・HPR-R

### 製品概要

- ・ N95マスク

### 規格

- ・ サイズ:R(レギュラー), S(スモール)
- ・ 50枚/箱, 6箱/ケース

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ NIOSH認定番号 TC-84A-3348

### 性能

- ・ 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)の性能試験においてN95規格をクリアした製品です
- ・ 空気感染予防策として病室への入室時、気管挿管等エアロゾルの発生場面、微粒子が発生するレーザー手術時などで着用者の呼吸器感染のリスクを低減

### 快適性

- ・ 立体構造となっているため、口周りを圧迫せず長時間の着用も苦痛になりません

### その他の特徴

- ・ レギュラーサイズ(R)とスモールサイズ(S)あり
- ・ 顔に密着するので空気感染予防に有効



### 資料請求先

株式会社ホギメディカル

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7

TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344

<https://www.hogy.co.jp>

## Air+N95レスピレーター

### 製品概要

- ・国内医療従事者へのフィット率試験でも95% (OSHA承認プロトコル搭載の定量測定器を用いた医療従事者 (N=119名) を対象した結果。2021年11月19日現在) という高いフィット性を持つN95レスピレーターです
- ・アジャスター機能により高いフィット性能を実現します
- ・MサイズとLサイズの2サイズ展開により、フィットしやすいサイズを選択できます

### 規格

- ・入数 20枚入/箱×16箱/ケース (Mサイズ・Lサイズ共通)

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・排気弁なし: NIOSH承認番号: TC-84A-7229

### 快適性

- ・肌にやさしい素材とクッション付きノーズワイヤーで快適性を実現しました



Air+N95  
レスピレーター  
排気弁なし

詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
<http://www.moraine.co.jp> お問い合わせ [info@moraine.co.jp](mailto:info@moraine.co.jp)

## 取替え式防じんマスク サカキ式 1180MD型

### 規格

- ・サイズ: フリーサイズ
- ・1箱1個入り (フィルタ 1 個付き)

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・日本防じんマスク国家検定合格 RL2: 第TM538号

### 性能

- ・取替え式防じんマスク 区分: RL2 (捕集効率95%以上)  
※N95マスクと同等のフィルタ捕集性能を具備
- ・吸気抵抗: 80Pa以下 (平均72Pa)
- ・排気抵抗: 45Pa以下 (平均25Pa)
- ・質量: 114g以下 (平均99g)

### 快適性

- ・肌に刺激が少なく、顔と密着しやすいシリコン面体採用
- ・小型軽量モデル
- ・フィットチェッカー内蔵で、簡単にフィットチェックが可能です

### その他の特徴

- ・マスク本体は滅菌でき、繰り返し使用が可能です
- ・日本製



### 資料請求先

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

興研株式会社  興研株式会社

〒102-8459 東京都千代田区四番町 7 番地  
TEL 03-5276-1917 FAX 03-3265-1976  
<https://www.koken-ltd.co.jp/hiluck/>

## 高性能マスク LUFKA®

### 製品概要

- ・純国産、「息のしやすさ」を追求したレスピレータマスク

### 規格

- ・LUFKA®本体:1個入/箱
- ・プリーツパックフィルタ®:3個入/箱

### 性能

- ・NaCl(粒子径 $0.075 \pm 0.02 \mu\text{m}$ )捕集効率99%以上
- ・吸気抵抗49Pa未満(試験流量85L/min)
- ・排気抵抗47Pa未満(試験流量85L/min)

### 快適性

- ・装着部分がエラストマー素材により柔らかなフィット感を実現

### その他の特徴

- ・本体とフィルタを組み合わせることで使用することができます
- ・本体とフィルタ共に洗浄、滅菌や消毒ができます



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## 労研式マスクフィッティングテスター MT-05U型

### 製品概要

- ・マスクが顔にどれくらい密着しているかを測定する測定器です
- ・定量的フィットテストを行うための測定器です
- ・マスク内外の粒子数を測定し、その比率からマスクの密着度を数値化します

### 規格

- ・本体寸法:210(W)×240(D)×232(H)mm
- ・本体質量:約3kg

### 性能

- ・日本産業規格JIS T8150:2021標準の定量的フィットテストなどが行えます
- ・N95やDS2マスク、取替え式防じんマスクなどの測定が可能です
- ・フィットテスト、フィットチェック、トレーニングモードを搭載しています

### 快適性

- ・試験ガイドによりマスクに穴を開けずに測定することができます
- ・付属ミラーでマスクの装着状態をチェックしながら測定できます
- ・カラータッチパネルにより操作が簡便です

### その他の特徴

- ・PC通信ソフトでは被験者やマスクの情報、測定結果の管理などが可能です
- ・標準付属の専用ソフトケースにより持ち運びが簡便です



詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

柴田科学株式会社



本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6

TEL 03-3822-2111 03-3822-2122

<https://www.sibata.co.jp>

## マスクフィットテスター AccuFIT 9000 PRO Model 3000-J1

### 製品概要

- マスクの装着状態を定量的に確認。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定を可能にします
- CPC凝縮粒子カウンタ (CNC凝縮核カウンタとも呼ばれます) を採用
- 一般的なフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠
- 見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーン
- 製品単独でも、PC経由でも操作可
- 通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載

### 性能


- JIS規格 JIS-T8150:2021に準拠

### 快適性

- 測定時間はわずか2分半

### その他の特徴

- 寸法 208 (W) × 152 (H) × 263 (D) mm
- 質量 3.1kg

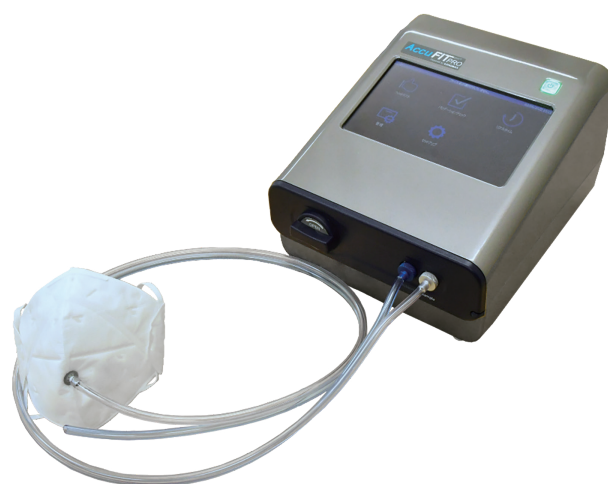

### 資料請求先

日本カノマックス株式会社



〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1  
TEL 06-6877-0447 FAX 06-6877-8263  
environment@kanomax.co.jp

## 定量性N95マスクフィットテスター PortaCount Pro+IP ULTRA

### 製品概要

- 従来の定性フィットテストで用いる個人の感覚(甘み・苦み)という曖昧な判断基準ではなく、数値で結果を得られるため、客観的かつ正確にN95マスクと個人の顔のフィット性を把握することが可能な定量フィットテスター
- N95コンパニオンテクノロジーにより、N95マスクと顔との密着度にフォーカスした測定が可能
- 測定原理:CPC (Condensation Particle Counter)
- 2019年9月にOSHAにより承認された、2分29秒のフィットテストを実施可能。これにより、医療従事者の負担を大幅に軽減
- 対象微粒子径:0.02 $\mu$ m-1 $\mu$ m (N95モード:公称0.055 $\mu$ m)
- 付属のソフトウェア[Fit Pro Ultra]にプログラムされたアニメーションにより、フィットテスト時の動作を分かりやすくサポート
- ディスプレイにはタブレットもしくはPCを使用。本体と無線接続が可能で操作性が向上

### 性能

- OSHA (米国労働安全衛生局) 呼吸器防護規格 29CFR1910.134に準拠

### その他の特徴

- サイズ: 12×27×24cm(本体), 25.4×52.1×39.4cm(ケース)
- 重量: 3.2kg(本体のみ), 6.9kg(標準アクセサリおよびケースを含む)



詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
http://www.moraine.co.jp お問い合わせ info@moraine.co.jp

## HALYARD フィットテストキット

### 製品概要

- ・ N95レスピレーターが正しく着用できていることを確認するための定性的フィットテストキット

### 規格

- ・ 入数:1セット/箱

### 性能

- ・ サッカリン溶液を用いて、甘みを感じるかどうかで漏れを確認できます

### 快適性

- ・ 電源などの付帯設備がなくても、フィットテストを実施できます

### その他の特徴

- ・ 様々なタイプのN95レスピレーターのフィットテストに使用できます
- ・ 主な内容物: フード、ネブライザー×2、感度テスト用サッカリン溶液×1、フィットテスト用サッカリン溶液×1
- ・ サッカリン溶液(99003)のみの購入も可能です



### 資料請求先



### O&M Halyard Japan 合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー  
TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574  
<https://www.halyardhealthcare.com>

## 定性的フィットテストキット FIT-Ⅱ型

### 規格

- ・ サイズ:フリーサイズ
- ・ 箱のセット内容
  - » フード…10枚
  - » いき値スクリーニング用噴霧器(赤ラベル)…1本
  - » いき値スクリーニング用溶液(赤ラベル)…5mL×12本
  - » フィットテスト用噴霧器(黒ラベル)…1本
  - » フィットテスト用溶液(黒ラベル)…5mL×12本
  - » 収納用段ボール…1個(噴霧器スタンドとしても使用できます)
  - » 本取扱説明書…1枚(QRコードより、使いかたとフィットテストのしかたを動画でも確認できます)

### 性能

- ・ JIS T8150に準拠  
フード内に甘味成分であるサッカリンナトリウム溶液を噴霧して、その甘味を感じなければフィットが良好なことが定性的に確認できます

### 特徴

- ・ 複数人のフィットテストに便利なフード10枚入
- ・ いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けが付きやすい色分けラベル
- ・ 小分けの溶液パックで衛生的かつ保管に便利

### 注意事項

- ・ テストを行う前に15分は飲食、喫煙をしないでください。味覚に影響して、テストが確実にできません



### 資料請求先

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

### 興研株式会社



### 興研株式会社

〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地  
TEL 03-5276-1917 FAX 03-3265-1976  
<https://www.koken-ltd.co.jp/hiluck/>

## 3M™ フィットテストキット FT-10

### 製品概要

- サッカリン (甘味) を使用した定性フィットテストキットです
- 保護具の選択時や着用訓練時には、簡易にフィット性を確認できます
- キット内容
  - » フード 1
  - » カラー 1
  - » ネブライザー 2
  - » 感度テスト溶液 (甘味) 1
  - » フィットテスト溶液 (甘味) 1
  - » 取扱説明書 1



### 資料請求先

#### スリーエム ジャパン株式会社

〒158-8583 東京都品川区北品川 6-7-29

カスタマーコールセンター：0570-011-321

[http://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/company-jp/](http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/)

3Mは3M社の商標です。

## 電動ファン付き呼吸用保護具 サカホ式 BL-321H

### 規格

- サイズ: フリーサイズ
- 1箱1個入り (電池・充電器付き, フィルタ 1 個付き)

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- 日本電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格 PL3: 第 TP101号

### 性能

- ろ過材の性能による区分: PL3 (捕集効率 99.97%以上)
- 試験流量: 大風量形 (138L/min)
- 漏れ率に係る性能: S級 (0.1%以下)
- 質量: 265g以下 (平均257g)

### 快適性

- 常に陽圧を保つ高い防護性で、マスク内への外気の漏れ込みを防止
- 呼吸に合わせて送風するため、装着者の呼吸への負担を軽減
- 肌に刺激が少なく、顔と密着しやすいシリコン面体採用
- バッテリー内蔵の一体型
- 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵

### その他の特徴

- バッテリーの電圧低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
- 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
- 水の侵入を防ぐ、高い防水性 [IPX4相当]
- 専用フード (別売) の着用で頭部と顔面の保護が可能



専用フード着用時

### 資料請求先

#### 興研株式会社

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

#### 興研株式会社

〒102-8459 東京都千代田区四番町 7 番地

TEL 03-5276-1917 FAX 03-3265-1976

<http://www.koken-ltd.co.jp/hiluck/>



## 電動ファン付き呼吸用保護具 サカキ式 BL-711H

### 規格

- ・ サイズ: フリーサイズ
- ・ 1箱1個入り(電池・充電器付き, フィルタ1個付き)

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 日本電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格 PL3: 第TP81号

### 性能

- ・ ろ過材の性能による区分: PL3(捕集効率 99.97%以上)
- ・ 試験流量: 大風量形(138L/min)
- ・ 漏れ率に係る性能: S級(0.1%以下)
- ・ 質量: 753g以下(平均723g)

### 快適性

- ・ 常に陽圧を保つ高い防護性で, マスク内への外気の漏れ込みを防止
- ・ 呼吸に合わせて送風するため, 装着者の呼吸への負担を軽減
- ・ 肌に刺激が少なく, 顔と密着しやすいシリコン面体採用
- ・ バッテリー内蔵の一体型
- ・ 会話を明瞭にする「スピーカー」内蔵

### その他の特徴

- ・ バッテリーの電圧低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
- ・ 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
- ・ 水の侵入を防ぐ, 高い防水性「IPX4相当」



### 資料請求先

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

興研株式会社  興研株式会社

〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地  
TEL 03-5276-1917 FAX 03-3265-1976  
<https://www.koken-ltd.co.jp/hiluck/>

## 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R-MED

### 製品概要

- ・ セット内容
  - » 面体ユニット「MU-28R-MED」…1台
  - » フィルター「X2-MED(フィルタガード付)」…10個
  - » バッテリー「BAL-L1」…1個
  - » 充電器「CH-L1」…1個

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 国家検定合格品 型式検定合格番号 第TP76号
- ・ 国家検定区分 直結式(半面形面体) 通常風量形/PL1/B級

### 快適性

- ・ 呼吸に合わせて清浄空気を供給するタイプで, 呼吸が楽
- ・ 面体内圧を常に陽圧(正圧)に保つため, 面体がズレても, ウイルス等を吸入するリスクを低減します
- ・ 肌に優しいシリコンゴム製
- ・ スイッチレス  
マスクを装着して, 一呼吸すると送風を開始(ファンモーターが自動ON)。また, マスクを外すと, 約5秒後に送風を停止(自動OFF)
- ・ コードレス  
コードを引っかけて, 断線する心配がありません
- ・ 公称稼働時間 10時間以上

### その他の特徴

- ・ フィルタガード付きで, 拭き取りが簡単です
- ・ 保護めがねやフェイスシールドと併用できます



Sy28R-MED 装着例



梱包

### 資料請求先

 株式会社 重松製作所  
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

〒101-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1  
TEL 03-6903-7525 <https://www.sts-japan.com>

## 3M™ バーサフロー™ 電動ファン付き防護マスク TR-300+HKL

### 製品概要

- ・電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで有害な粒子状物質の侵入を防ぎ、快適で長時間の作業へ対応します

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- ・NIOSH認定

### 性能

- ・漏れ率 0.1%以下
  - ・NaCl粒子捕集効率 99.97%以上
  - ・一定風量 190L/分
  - ・指定防護係数<sup>※2</sup> 25
  - ・質量 1080g
  - ・バッテリー公称稼働時間8時間
- ※2 OSHA 29CFR1910.134.ANSI

### 快適性

- ・リンクフード内は絶えず陽圧に保たれ普通の呼吸を維持します
- ・ゴーグルなどは不要で頭部から顔全体を保護します
- ・人間工学に基づく曲線的なデザインで体にしっかりフィットします

### その他の特徴

- ・風量低下、バッテリー電圧低下を音と光でお知らせします
- ・耳部分が露出するため、聴診器も使えます

3M, Versaflo, バーサフローは3M社の商標です。



### 資料請求先

#### スリーエム ジャパン株式会社

〒158-8583 東京都品川区北品川 6-7-29

カスタマーコールセンター：0570-011-321

[http://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/company-jp/](http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/)

## CleanSpace HALO

### 製品概要

- ・HEPAフィルター、電動ファン、バッテリー、マスクの4つの機能を小型ユニット化したNIOSH承認の超軽量PAPRです
- ・フィルター粒子捕集効率：0.3ミクロンの微粒子を99.97%以上
- ・風量は呼吸量にシンクロして可変
- ・2時間充電で最大9時間稼働

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- ・NIOSH承認 承認番号: TC-21C-1102 (ハーフマスク)

### 快適性

- ・ユニットは400g以下と軽量でベルトやホースが不要です
- ・マスクはソフトなやさしい感触のシリコン製で再生可能です
- ・マスク内は常に陽圧に保たれ新鮮な空気を供給します

### その他の特徴

- ・バッテリー残量低下と風量低下をアラームとランプでお知らせします
- ・防護性能の高い専用フード (BIOHOOD) や、使用者が排出する呼気をろ過するフィルター (Steri-Plus) などのアクセサリがあります



CleanSpace HALO



専用フード  
BIOHOOD システム



排気弁フィルター  
HALO Steri-Plus

詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

#### 株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F

<http://www.moraine.co.jp> お問い合わせ [info@moraine.co.jp](mailto:info@moraine.co.jp)

# ガウン・エプロン・カバーオール

## イワツキ アイソレーションガウンPEラミ

### 製品概要

- ・高バリア性と耐薬品性を兼ね備えた防水性アイソレーションガウン

### 性能

- ・AAMI (米国医療機器振興協会) の「防護服類のバリア性を測る基準」のレベル4適合
- ・抗がん剤耐性評価基準ASTMD6978-05の抗がん剤耐性試験を実施

### 快適性

- ・袖を通すだけで簡単に装着できるようにたたんであります
- ・首元は着脱しやすい面ファスナーです



詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

 **イワツキ株式会社**

〒174-8556 東京都板橋区志村 1-32-18

TEL 03-3966-8371 <https://www.iwatsuki.co.jp>

## HALYARD SMSアイソレーションガウン

### 製品概要

- ・SMS製アイソレーションガウン (後ろ開きタイプ)
- ・ネック部分はひもタイプ

### 規格

- ・入数: 10枚/パック×12パック
- ・サイズ: フリー

### 性能

- ・細菌防護性能と耐液体浸透性能に優れた3層構造SMSファブリックを使用

### 快適性

- ・低リント性, 通気性に優れ, バリア性と快適性を兼ね備えています

### その他の特徴

- ・イラスティックカフ (77149), ニットカフ (77153) の2種類
- ・カラー: 黄色



### 資料請求先

 Owens  
& Minor

 HALYARD

**O&M Halyard Japan 合同会社**

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574

<https://www.halyardhealthcare.com>

## サラヤ プラスチックガウン

### 製品概要

- 防水性の高いポリエチレン製で、血液・体液などの湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します
- 袖口の形状がゴム袖式と親指フック式の2種類から選べます
- ノーマルタイプとライトタイプの2種類から選べます

### 規格

- サイズ: フリーサイズ, XLサイズ(プラスチックガウンゴム袖式のみ)
- 1箱15枚入り(プラスチックガウンフリーサイズ), 12枚入り(プラスチックガウンXLサイズ), 30枚入り(プラスチックガウンライト)

### 快適性

- たたまれた状態のまま手を差し込み、両手を広げるだけで簡単にすばやく着用できます(プラスチックガウンライト)

### その他の特徴

- カバー範囲が広いデザイン設計で、首周りが大きく開かず、背面もしっかり防護できます



### 資料請求先

サラヤ株式会社 **SARAYA**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

TEL 06-6797-2525

資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部

TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## JMS オペガウンⅢ

### 製品概要

- 手術用ガウン

### 規格

- サイズ: M, L, LL

### 性能

- 撥水素材の使用により、血液などが内部へ浸透しにくくなっています
- AAMI レベル3

### 快適性

- 通気性に優れた軽い素材を採用しています

### その他の特徴

- 横結びタイプ
- マスク付き, マスクなしタイプがあります



マスクなしタイプ

マスク付きタイプ

### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町 12 番 17 号

カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## アイソレーションガウン

### 製品概要

- ・ 外来者の面会用, 患者の看護時の接触感染防止用ディスプレイザブル予防衣です

### 規格

- ・ 25枚入

### その他の特徴

- ・ 材質: ポリプロピレン
- ・ ひもの長さ: 210cm



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## メッキンガウン(プロティガ製)・MG-BVB-14

### 製品概要

- ・ 医療用ガウンの中でも最高のバリア性を備えています

### 規格

- ・ サイズ: 12(M), 13(L), 14(LL), 15(XL)
- ・ 30枚/ケース

### 性能

- ・ ANSI AAMI PB70レベル4適合品
- ・ スパンボンド不織布の間に透湿性フィルムを挟んだ3層構造の不織布

### 快適性

- ・ 透湿性のある特殊フィルムを使用しており, 長時間の手術も快適に着用いただけます

### その他の特徴

- ・ ヒートシール製法で縫製穴をなくし, バリア性を高めています
- ・ マスク付あり
- ・ 電子線滅菌品



### 資料請求先

株式会社ホギメディカル

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7

TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344

<https://www.hogy.co.jp>

## メッキンガウン(サーレム製)・MG-SMS-14N

### 製品概要

- ・スタンダードな手術用ガウンです

### 規格

- ・サイズ:12(M), 13(L), 14(LL), 15(XL)
- ・45枚/ケース

### 性能

- ・ANSI AAMI PB70レベル3適合品
- ・スパンボンド製法とメルトブローン製法を組み合わせた5層構造の不織布を使用

### 快適性

- ・バリア性, 着心地, 軽さのバランスを重視
- ・ソフトな質感で着用者の動きにフィット

### その他の特徴

- ・ヒートシール製法で縫製穴をなくし, バリア性を高めています
- ・マスク付あり



### 資料請求先

株式会社ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7  
TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344  
<https://www.hogy.co.jp>

医療の現場に、未来に、安全を

**HOGY®**

## アイソレーションガウン

### 製品概要

- ・手術室外回り, 救急, ICU, 患者・医療従事者双方間の接触時や面会時など, 用途に合わせてさまざまなタイプをご用意しています

### 規格

#### スパンボンド(カフ付):軽くて快適な着心地

- ・撥水, 首ひも, 腰ひも, 3色(青・黄・ピンク)
- ・入数:5枚/袋×5×2/ケース

#### スパンボンド ラミ加工(カフ付):ラミネート加工により防護性を向上

- ・防水, 首ひも, 腰ひも, 白色
- ・入数:5枚/袋×5×2/ケース

#### SMS(カフ無):スパンボンド素材よりもさらに強度に優れたSMS素材を使用

- ・撥水, 首ひも, 腰ひも, 2色(黄・青)
- ・入数:10枚/袋×10/ケース

#### SMS(カフ無):着脱のしやすさ, 快適性, 防護性のすべてを追求

- ・撥水, オーバーヘッド, 背開き, 黄色
- ・入数:10枚/袋×10/ケース



### 資料請求先

メドライン・ジャパン合同会社

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-4-1 住友不動産後楽園ビル 15 階  
会社代表 / TEL 03-5842-8800 FAX 0120-37-5801  
<https://www.medline.co.jp>

製品及びご注文に関するお問い合わせは、弊社担当営業または上記までお願いいたします。



## サラヤ プラスチックエプロン

### 製品概要

- 防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。
- 標準的なノーマルタイプと、カバー範囲の広いワイドタイプの2種類から選べます

### 規格

- サイズ: フリーサイズ
- カラー: ブルー, ホワイト, ピンク
- 1箱50枚入り(プラスチックエプロン), 70枚入り(プラスチックエプロンワイド)

### その他の特徴

- 首周りが大きく開かず、背面もしっかり防護します(プラスチックエプロンワイド)
- カラー: ブルー, ホワイト, ピンク



### 資料請求先

#### サラヤ株式会社 **SARAYA**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

TEL 06-6797-2525

資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部

TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## 3M™ 化学防護服 4565

### 製品概要

- ミストやスプレーから作業者の身体表面を守る化学防護服です

### 性能

- EN※規格 タイプ4: スプレー防護用密閉服 適合品
  - EN※規格 タイプ5: 微粒子防護用密閉服 適合品
  - EN※規格 タイプ6: ミスト防護用密閉服 適合品
  - EN※規格: 静電気防護 適合品
  - EN※規格: 感染性物質からの防護 (EN14126) 適合品
- ※EN: European Norm

### 快適性

- スパンボンド、ポリエチレンフィルムラミネートにより、柔らかい着心地を実現

### その他の特徴

- ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉できます
- ファスナーカバーで防護服内部への危険物の侵入を防ぎます
- シールドシーム加工により、縫い目からの危険物の侵入を阻止し、バリアー性を強化
- 本体生地は安全性の高い無孔質のポリエチレンフィルムをラミネート



### 資料請求先

#### スリーエム ジャパン株式会社

〒158-8583 東京都品川区北品川 6-7-29

カスタマーコールセンター: 0570-011-321

[http://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/company-jp/](http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/)

3Mは3M社の商標です。

## 全身防護服 カプセルスーツ Mark- I

### 製品概要

- 防御性能と快適性を両立させつつ、脱衣時の安全性をも向上させた、新しいデザインの全身防護服です
- 背面にデザインした開口部から脱衣するため、汚染された前面部に触れずに脱げます。そのため脱衣時の介助者が不要または最小限の介助で安全に脱衣が可能
- 従来品と比較して半分以下の時間で脱衣でき、着用者の負担を軽減
- フード一体型デザインにより、ゴーグルやマスクが不要。顔面に隙間ができない上、より広い視野を確保することができます
- シューカバー一体型デザインにより、シューカバーが不要で脚部に隙間ができません
- アクティブベンチレーターを搭載し、スーツ内にこもる熱、湿気、CO<sub>2</sub>を排出
- フードバイザー部は広く、着用者の笑顔が見える防護服です

### 規格

- サイズ:S, M, L

### 性能

- 第三者機関による防御性能テスト JIS T 8115:2015 タイプ4, 5, 6実証済み



詳細な製品  
情報はこちら



資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
http://www.moraine.co.jp お問い合わせ info@moraine.co.jp



# 手袋

## イワツキ ニトリルグローブ セーフिटツu

### 規格

- ・ サイズ:SS, S, M, L

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 一般医療機器届出番号:13B3X00207000053

### 性能

- ・ 医療用検査用ニトリル・グローブ基準  
ASTM D6319-10適合
- ・ 医療用手袋抗がん剤耐性評価基準  
ASTM D6978-05実施
- ・ 指先滑り止め加工
- ・ ラテックスフリー
- ・ パウダーフリー

### その他の特徴

- ・ 薄手で伸縮性が高く、手に柔らかくフィットし、作業性のよいニトリルグローブです



詳細な製品  
情報はこちら



### 資料請求先

 **イワツキ株式会社**

〒174-8556 東京都板橋区志村 1-32-18

TEL 03-3966-8371 <https://www.iwatsuki.co.jp>

## HALYARD ラベンダー ニトリルグローブ

### 製品概要

- ・ ニトリル検査検診用グローブ
- ・ 薄く柔らかい感触で、採血、輸液管理、気管吸引、血圧測定などに適しています

### 規格

- ・ 入数:250枚/箱×10箱
- ・ サイズ:XS, S, M, L
- ・ 全長:240mm

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 販売名:ニトリル検査検診用グローブ  
医療機器製造販売届出番号:13B1X10282GL0001
- ・ 販売名:ニトリル歯科用グローブ  
医療機器製造販売届出番号:13B1X10282GL0002

### 性能

- ・ 指先厚み0.08mm, 引張強度 28MPa(老化後), 高い触感と十分な強度
- ・ 水密性(ピンホール)AQL1.0
- ・ 50種類以上の薬剤耐性試験済 (ASTM D6978-05)

### 快適性

- ・ 薄く柔らかい感触による高い操作性
- ・ グローブ汚染リスクを低減する、独自のリフトアップ機構のエコプルパッケージ

### その他の特徴

- ・ ディスペンサーボックスはエコプルパッケージとスマートプルパッケージの2種類から選択可能です  
※強度, 厚みについては製造上のばらつきが生じることがあります



### 資料請求先

 **Owens & Minor** |  **HALYARD**

**O&M Halyard Japan 合同会社**

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574

<https://www.halyardhealthcare.com>

## HALYARD パープルエクストラ ニトリルグローブ

### 製品概要

- ・ ニトリル検査検診用グローブ
- ・ 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止

### 規格

- ・ 入数:50枚/箱×10箱
- ・ サイズ:XS, S, M, L
- ・ 全長:310mm

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 販売名: ニトリル検査検診用グローブ  
医療機器製造販売届出番号: 13B1X10282GL0001

### 性能

- ・ 指先厚み0.15mm, 引張強度 21MPa(老化後)
- ・ 水密性(ピンホール)AQL1.0
- ・ 50種類以上の薬剤耐性試験済 (ASTM D6978-05)

### 快適性

- ・ 化学療法薬剤のミキシングや取り扱い時など、二重手袋着用時のアウター用
- ・ カフ部分が長く、内視鏡検査、ガーゼカウント、簡単な洗浄作業に適しています

### その他の特徴

- ・ 二重手袋のアウターとして着用する場合は、着用をスムーズにするアンダー専用のピンクアンダーガードと合わせてご使用ください  
※強度、厚みについては製造上のばらつきが生じる場合があります



### 資料請求先



### O&M Halyard Japan 合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー  
TEL 03-4565-4576 FAX 03-4565-4574  
<https://www.halyardhealthcare.com>

## サラヤ ニトリル検査検診用グローブ/LT

### 製品概要

- ・ しなやかなフィット感で作業がしやすく、耐久性、耐薬品性に優れた高いバリア性能を兼ね備えたニトリル手袋です
- ・ 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー＆ラテックスフリータイプです

### 規格

- ・ サイズ:XS, S, M, L
- ・ カラー:ブルー(ニトリル検査検診用グローブのみ), ホワイト
- ・ 1箱200枚入り(ニトリル検査検診用グローブ), 300枚入り(ニトリル検査検診用グローブLT)

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 一般医療機器 届出番号 27B1X00120000200 (ニトリル検査検診用グローブ)
- ・ 一般医療機器 届出番号 27B1X00120000201 (ニトリル検査検診用グローブLT)

### 性能

- ・ ニトリル検査検診用グローブ規格 ASTM D6319-10適合
- ・ 抗がん剤耐性規格 ASTM D6978-05適合(12種類)
- ・ 食品衛生法適合
- ・ 一時皮膚刺激、皮膚感作性に関する試験実施済み (ISO-10993-10)
- ・ 耐薬品性試験実施済み (EN374-3)
- ・ 血液由来病原体透過性試験実施済み (ASTM F1671)

### 快適性

- ・ 特許取得済みの手袋重ね技術を採用。1枚ずつ互いに重ねる梱包技術により、手袋同士が絡まり複数枚まとまって出てきてしまう可能性を低減しています

### その他の特徴

- ・ 指先に滑り止め加工が施され、操作性に優れています
- ・ カラー:ブルー(ニトリル検査検診用グローブのみ), ホワイト



### 資料請求先

### サラヤ株式会社 SARAYA

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8  
TEL 06-6797-2525  
資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部  
TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## サラヤ ハイブリッドグローブさくら

### 製品概要

- プラスチック手袋にニトリル成分を配合することにより、従来のプラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が向上
- アレルギーに配慮した、加硫促進剤フリー、パウダーフリー、ラテックスフリータイプです
- やわらかい印象のさくら色を採用しました

### 規格

- サイズ:XS, S, M, L
- 1箱150枚入り

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- 一般医療機器届出番号 27B1X00120000400

### 快適性

- 手首側から一枚ずつ取り出せる箱設計のため、指先部分を汚染せず衛生的に取り出して装着できます

### その他の特徴

- ムダなく使える左右兼用タイプです



### 資料請求先

サラヤ株式会社

**SARAYA**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

TEL 06-6797-2525

資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部

TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## サラヤ プラスチック手袋

### 製品概要

- 素手感覚で使用できる、伸縮性のある薄手仕上げです
- 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです
- 排泄・入浴介助や清拭時など、様々なシーンで使用できます

### 規格

- サイズ:XS, S, M, L
- 1箱100枚入り

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- 一般医療機器届出番号 27B1X00120000700

### その他の特徴

- ムダなく使える左右兼用タイプです



### 資料請求先

サラヤ株式会社

**SARAYA**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

TEL 06-6797-2525

資料請求・お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部

TEL 06-4706-3938 <https://med.saraya.com/>

## GAMMEX® ガメックス パウダーフリー

### 製品概要

- ・天然ゴム製
- ・手術用手袋
- ・独自の特別洗浄により、ラテックスたん白や化学物質の残留量を低減

※「GAMMEX」はアンセルリミテッドの登録商標です

### 規格

- ・サイズ:5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
- ・50双/箱

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- ・医療機器認証番号: 21200BZY00282000

### 性能

- ・外面のシリコンコーティングと内面のポリウレタンコーティングにより二重装着や、ぬれた手での装着も容易です
- ・化学療法薬剤の耐浸透性試験 (ASTM D6978-05) を実施済み



### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町12番17号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## GAMMEX® AF・マイクロフィット

### 製品概要

- ・加硫促進剤をはじめ、ガゼイン、パウダー、天然ゴムラテックスを一切使用していない新しい合成ゴム製の手術用手袋です

※「GAMMEX」はアンセルリミテッドの登録商標です

### 規格

- ・ポリクロロプレン合成ゴム製手術用手袋
- ・サイズ:5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
- ・50双/箱

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- ・一般的名称: 非天然ゴム製手術用手袋
- ・医療機器認証番号: 230ADBZX00014000

### 性能

- ・従来のポリクロロプレン製手術用手袋と比べ、より柔らかい触覚感度を実現(当社比)
- ・化学療法薬剤の耐浸透性試験 (ASTM D6978-05) を実施済み

### 快適性

- ・独自の製法により、薄手の設計を実現し、かつ優れた装着性とグリップ性を確保



### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町12番17号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## アンセルニトリルグローブ

### 製品概要

- ・ ニトリルゴム (合成ゴム) 製

### 規格

- ・ 左右兼用
- ・ サイズ:SS, S, M, L

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 医療機器届出番号: 34B1X00001000068

### 性能

- ・ ニトリルゴム (合成ゴム) 製なので、ラテックスたん白質によるアレルギーの方々も使用可能
- ・ 「ビード付きカフ」により、手首部分のずれ落ちを防止
- ・ 化学療法薬剤の耐浸透性試験 (ASTM D6978-05) を実施済み

### 快適性

- ・ 良質の素材を生かした、薄く、やわらかい仕上げは、快適なフィット感とグリップ感を提供
- ・ パウダーフリーなので、医療現場のパウダによるトラブルを防止



### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町12番17号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

## 化学防護手袋37-176, 93-260

### 規格

- ・ 4サイズ(S, M, L, XL)から選べます
- ・ 販売単位  
37-176…1双  
93-260…1箱25双入(50枚入)

### 性能

- ・ JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品

### 快適性

- ・ **37-176**  
安心の厚手タイプで、柔軟性があり作業しやすい手袋。シリコンフリーで、指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。
- ・ **93-260**  
3層構造で薄手。しかもシリコンフリー、パウダーフリーの手袋です。内側には着脱しやすい特殊コーティングが施されています。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。左右兼用です。

### その他の特徴

- ・ 材質  
37-176…ニトリル  
93-260…ニトリル, ネオプレン
- ・ 37-176, 93-260はアンセル製です



37-176



93-260



取り出しやすいケース入り

### 資料請求先



〒101-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1  
TEL 03-6903-7525 <https://www.sts-japan.com>

## トップ ニトリルグローブ

### 製品概要

- ・ ニトリルゴム製のためラテックスフリーです
- ・ パウダーフリーで微粉の飛散がありません

### 規格

- ・ **アイリスホワイト**  
サイズ: S, M, L  
包装単位: 200枚入/箱, 10箱/ケース
- ・ **プロバンスロイヤルブルー**  
サイズ: SS, S, M, L  
包装単位: 200枚入/箱, 10箱/ケース

### 性能

- ・ 食品衛生法の規格適合品



### 資料請求先

株式会社トップ **株式会社トップ**

〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号  
TEL 03-3882-7741 FAX 03-3882-7744

## トップ メディカルグローブ

### 製品概要

- ・ 滅菌済のニトリルグローブです
- ・ 滅菌品のため清潔操作が必要な場面での使用が可能です
- ・ 両手用, 片手用をラインナップしております

### 規格

- ・ **両手用**  
サイズ: S, M, L  
25双入/箱, 12箱/ケース
- ・ **片手用**  
サイズ: S, M, L  
50枚入/箱, 12箱/ケース

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・ 届出番号: 13B1X00085000134



### 資料請求先

株式会社トップ **株式会社トップ**

〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号  
TEL 03-3882-7741 FAX 03-3882-7744

## ARISTAニトリルグローブPF-W

### 製品概要

- ・ニトリルブタジエン(合成ゴム)製ディスポーザブル手袋です

### 規格

- ・サイズ:XS, S, M, L
- ・100枚入

### その他の特徴

- ・材質:ニトリルブタジエン(合成ゴム)
- ・未滅菌
- ・左右兼用



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## ノンパウダープラスチック手袋F

### 製品概要

- ・ポリ塩化ビニル製ディスポーザブルプラスチック手袋です
- ・1枚5.5gの厚手仕様(Mサイズ)

### 規格

- ・サイズ:XS, S, M, L
- ・100枚入

### その他の特徴

- ・材質:ポリ塩化ビニル
- ・未滅菌
- ・左右兼用



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## GAMMEX® ラテックスフリー手術用手袋NP

### 製品概要

- PI-KARE技術により、高い安全性と快適な操作を実現
- 加硫促進剤によるアレルギー発症リスクも低減
- 5品種のラインナップで、使用シーンに適した選択が可能  
PI: 業界初のエルゴノミクス認証を受けた快適な装着感  
PI Textured: 湿潤環境で操作しやすい高グリップタイプ  
PI Micro: 繊細な手技に適した超薄手タイプ  
PI Under: 二重装着しやすく、アウターがずれにくい  
アンダーグローブ  
PI Ortho: 保護性能を高める厚手タイプ

### 規格

- 包装 50双/箱
- サイズ 5.5~8.5

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- 医療機器クラス分類: クラスII (管理医療機器)
- 医療機器認証番号: 301AABZX00001000

### 性能

- エルゴノミクス認証を取得
- 術中にかかる筋負荷が、素手と比較して軽減
- ピンホール検査において、独自の高い検査水準による出荷

### 製造

アンセル エヌピー社

 **PI-KARE™**の装着感を  
実感してください



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時~17時15分(月~金) 祝日・弊社休業日を除く

## センシケア®アイス/センシケア®アイス ホワイト

### 製品概要

- 検査用ニトリル手袋シリーズの中で最も使用感、バリア性能に優れる手袋です。本品はパッケージにフィルムをつけることで、取り出し過ぎを防止します

### 規格

#### SensiCare®Ice ExamGlove

- サイズ:XS, S, M, L, XL
- カラー:青色
- 入数:XS~L:200枚/箱×10/ケース  
XL:180枚/箱×10/ケース

#### SensiCare®Ice White ExamGlove

- サイズ:XS, S, M, L, XL
- カラー:白色
- 入数:XS~L:200枚/箱×10/ケース  
XL:180枚/箱×10/ケース

### 取得済み公的認証規格（認定番号）

- 一般的名称: 非天然ゴム製検査・検診用手袋
- 販売名: メドライン非天然ゴム製検査・検診用手袋
- クラス分類: 一般医療機器
- 13B1X00062GLV003

### 性能

- 耐薬品試験実施済み
- 滑り止め加工(指先)
- 天然ゴム・ラテックス不使用
- 抗菌フィルム
- 抗菌フィルムによる取り出し過多防止

### その他の特長

- サイズ別カラーコード
- 2色展開



### 資料請求先

メドライン・ジャパン合同会社



〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル15階  
会社代表 / TEL 03-5842-8800 FAX 0120-37-5801

<https://www.medline.co.jp>

製品及びご注文に関するお問い合わせは、弊社担当営業または上記までお願いいたします。



## テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ

### 製品概要

- **1枚ずつ取り出せる快適さ!**  
グローブを取り出す時はカフ部を引っ張るだけ。素早く、確実に1枚ずつ取り出すことができます。グローブを取り出しすぎるストレスから解放されます
- **省スペースを実現**  
グレイシアゼロはコンパクトなスペースに2つのサイズを設置することができます

### 規格

- 梱包: 125枚/パック×16パック (2,000枚)
- サイズ: XS, S, M, L

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- 一般的名称: 非天然ゴム製検査・検診用手袋
- 医療機器製造販売届出番号: 13B2X10166000010

### 性能

- ASTM D6319-10 (医療用ニトリル手袋規格) に準拠

### その他の特徴

- 従来の紙製の Karton ボックスを廃止し、ポリエチレンパックに内箱を変更。また既存の紙箱製品に比べ、ダンボールのコンパクト化により保管スペース、輸送コストおよび廃棄物量のいずれにおいてもその削減に貢献



詳細な製品  
情報はこちら

### 資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
http://www.moraine.co.jp お問い合わせ info@moraine.co.jp

# キャップ・シューカバー

## シンプルキャップ

### 製品概要

- どのような髪型にもあうフリーサイズです

### 規格

- 色: ホワイト, ブルー
- 100枚入

### その他の特徴

- 材質: ポリプロピレン



### 資料請求先

ニプロ株式会社



医療機器情報室 0120-226-410

受付時間 9時～17時15分(月～金) 祝日・弊社休業日を除く

## 名優シューカバー

### 製品概要

- 履きやすく、ごわつかないシューカバーです
- 開口部が広く立ったまま簡単に履け、前後の区別もないので迷いません

### 規格

- 靴のサイズ30cmまで対応

### 性能

- シリコンフリー
- ラテックスフリー

### 快適性

- しっかりとした縫製で、滑り止め加工つき
- 足にフィットする歩きやすさ

### その他の特徴

- ポリプロピレン製



### 資料請求先

株式会社名優



〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL 047-480-6161 FAX 047-480-6162

# PPEキット

## 感染症対策セットV-DF-1

### 製品概要

- セット内容
  - » N95マスク[DD01-N95-2K]…1個
  - » フェイスシールド[SH-1]…1個
  - » 密閉服(使い捨て式)「マイクロガード2000PLUS」…1着
  - » シューズカバー「SC2000L」…1足
  - » インナー手袋…1双
  - » アウター手袋…1双

### 取得済み公的認証規格(認定番号)

- N95マスク:
  - » NIOSHが定める規格N95合格品  
(製品名:DD01-N95-2K, 合格番号:TC-84A-7642)

### 性能

- 防護服:
  - » JIS T 8115:2015「化学防護服」タイプ4, 5, 6適合品
  - » EN 14126「感染性物質に対する防護」  
耐人工血液浸透性 クラス6  
耐バクテリオファージ浸透性 クラス6
  - » EN 1149-5「静電気からの防護」

### 快適性

- 備蓄にも最適なセット
- N95マスク[DD01-N95-2K]  
3つの機能(アジャスター, クッション, 鼻当て)で顔にぴったり密着します。立体構造なので, 呼吸も会話も楽にできます
- フェイスシールド[SH-1]  
内側には防曇処理を施しており, 曇りにくいフェイスシールドです
- インナー手袋  
3層構造で薄手。内側には着脱しやすい特殊コーティングが施されています
- アウター手袋  
安心の厚手タイプで, 柔軟性があり作業しやすい手袋です
- 密閉服(使い捨て式)「マイクロガード2000PLUS」  
5サイズ(S, M, L, XL, 2XL)から選べます

### その他の特徴

- 保護めがねタイプの「感染症対策セットV-D-1」もあります



V-DF-1 装着例



梱包

### 資料請求先



株式会社重松製作所  
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

〒101-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1

TEL 03-6903-7525 <https://www.sts-japan.com>

## トップ 感染対策防護キット

### 製品概要

- 感染対策に素早く対応するオールインワンキットです
- 防護服, シューズカバー, N95マスク, ゴーグル, インナーアウターグローブのセット内容です

### 規格

- 防護服:S, M, L, XL, 2XL
- 包装単位:10キット/箱

### 取得済み公的認証規格(認定番号)

- N95マスク NIOSH認定(TC-84A-5411)

### 性能

- 防護服はAAMIレベル3適合品です



### 資料請求先

株式会社トップ 株式会社トップ

〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号

TEL 03-3882-7741 FAX 03-3882-7744

## トップ 感染対策キット

### 製品概要

- ・感染対策に素早く対応する不織布キットです
- ・N95マスク、アイソレーションガウン、キャップ、シューズカバー、ニトリルグローブ
- ※防護メガネの有無を選択可能です

### 規格


- ・包装単位:5キット/箱

### 取得済み公的認証規格 (認定番号)

- ・N95マスク:NIOSH認定(TC-84A-5411)

### その他の特徴

- ・ニトリルグローブをS, Mサイズから選択可能。

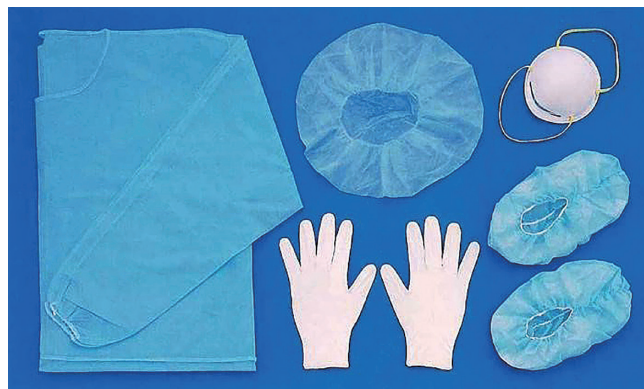

### 資料請求先

## 株式会社トップ 株式会社トップ

〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号  
TEL 03-3882-7741 FAX 03-3882-7744

## プリコーションセット・PRS-502

### 製品概要

- ・PPE製品(オーバーオール、フェースシールド、N95マスク、グローブ、シューズカバー)を組み合わせた製品です

### 規格

- ・10組/ケース
- ・オーバーオールの規格(レベル3/4)、ガウンタイプあり

### 性能

- ・ANSI AAMI PB70レベル4適合品
- ・NIOSH認定のN95マスクを標準セット

### 快適性

- ・オーバーオールは、緊急時にも1人で着用できます

### その他の特徴

- ・ズボンとシューズカバー、グローブで手足をガードします
- ・フェースシールドで目を保護します



### 資料請求先

## 株式会社ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7  
TEL 03-6229-1300 FAX 03-6229-1344  
<https://www.hogy.co.jp>

医療の現場に、未来に、安全を

# HOGY®

## オリガード・キット

### 製品概要

- プロ仕様の個人防護具が持ち歩けるようにキット化
- 厚さはわずか5ミリでバッグに入れて携行しやすく、広げれば即座に着用者を強力にガードします
- 標準予防策に必要とされる個人防護具をキット化し、携行可能に
  - » アイカバー、グローブ、エプロン、マスクの4つの個人防護具に加え、汚染部位を拭き取るためのアルコール除菌ワイプや廃棄用のゴミ袋も同梱しています

### その他の特徴

- 災害時や応急手当、嘔吐などの汚物処理といった緊急時に役立ちます



詳細な製品  
情報はこちら

資料請求先

株式会社モレーンコーポレーション



〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1 ユニゾンモール 3F  
<http://www.moraine.co.jp> お問い合わせ info@moraine.co.jp

## その他

### 飛沫プロテクタ

#### 製品概要

- ・袋状の保護シートに、首掛けと袖部分を付け、患者の頭頸部を覆い、空間を作ることで作業性を確保し、医療従事者を飛沫曝露から守ります

#### 規格

- ・120枚/ケース

#### その他の特徴

- ・使用した気管チューブや人工鼻などの汚染廃棄物をシートの中に包み込み一括廃棄することができ、患者周辺が汚染されにくい
- ・使用事例: 救急・手術室での気管挿管および抜管など



製品イメージ



着衣のイメージ

使用時のイメージ

#### 資料請求先

株式会社ジェイ・エム・エス



〒730-8652 広島県広島市中区加古町12番17号  
カスタマーサポートセンター 0120-923-107

### ハンドヘルドパーティクルカウンター Model 3888・3889

#### 製品概要

- ・見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場
- ・医療現場の空気清浄度の管理、フィルター試験等に使用
- ・大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ
- ・付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング(別売の台座が必要です)
- ・粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)
- ・日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応

#### 性能

- ・ISO21501-4およびJIS B9921に準拠

#### 快適性

- ・付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御
- ・別売の台座を装着すればWi-Fi通信が可能(いずれも別売の台座が必要です)

#### その他の特徴

- ・寸法 100(W)×213(H)×55(D) mm
- ・質量 650g(電池を含まない)



#### 資料請求先

日本カノマックス株式会社



〒565-0805 大阪府吹田市清水2-1  
TEL 06-6877-0447 FAX 06-6877-8263  
environment@kanomax.co.jp



一般社団法人  
職業感染制御研究会  
理事長 四柳 宏

**連絡先**

一般社団法人 職業感染制御研究会 事務局  
〒171-0021  
東京都豊島区西池袋 5-26-16 CHIBA ビル 6F  
URL: <http://jrgoicp.umin.ac.jp/>  
E-MAIL: [jrgoicp@gmail.com](mailto:jrgoicp@gmail.com)  
2022.04a